


Termometru infraroșu

I. Parametrii

Nume: Termometru infraroșu	Metoda de măsurare: infraroșu
Interval de măsurare: Temperatură corp (32.0°C-43.0°C); Temperatură obiect (0°C-100°C)	
Culoare fundal: 32.0 °C-37.5 °C/verde; 37.6 °C-43.0 °C/roșu	
Timp de măsurare: ~ 1 secundă	Baterie: 2 baterii tip AA
Distanța de măsurare: 2~5cm	Oprire automată: lipsă de activitate~15secunde
Dimensiune: 158*94*41.5mm	Acuratețe măsurare: ±0.2 °C

II. Specificații produs

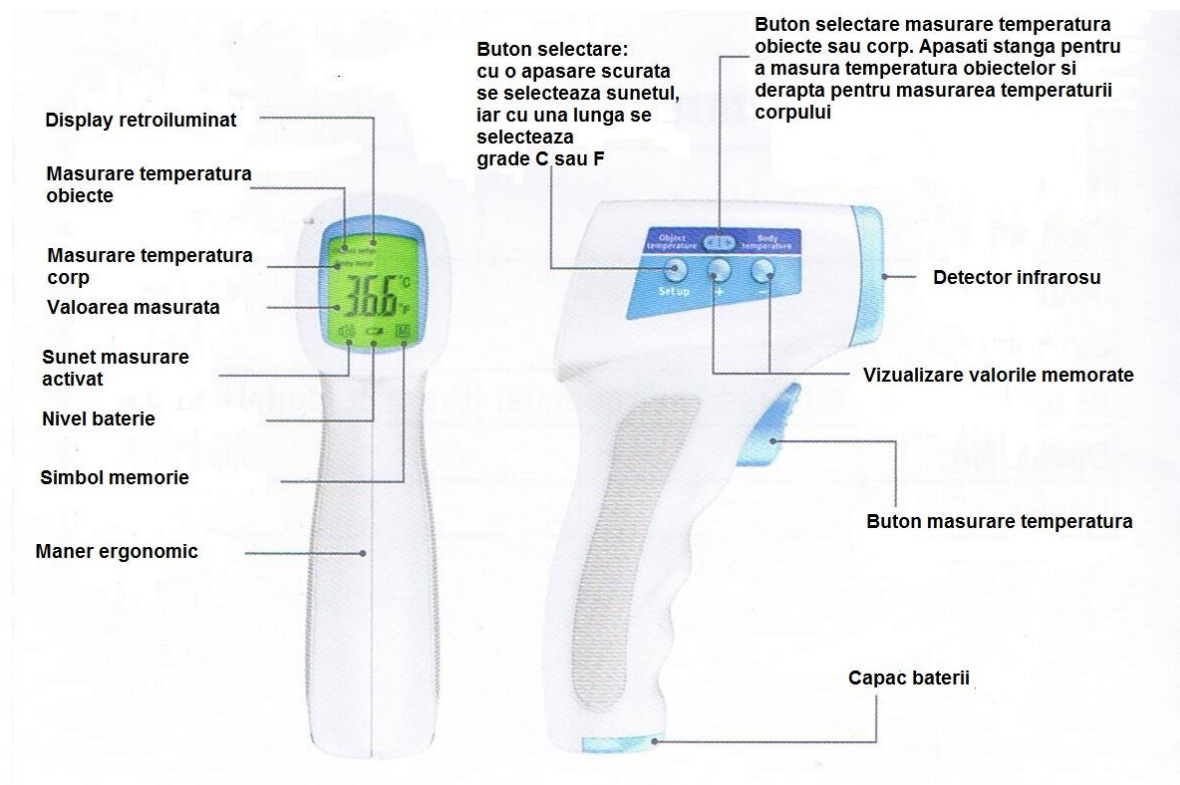

III. Proceduri de utilizare

1. Măsurare antropometrică:

- Se apasă la dreapta butonul de măsurare temperatură obiect/temperatură corp pentru a selecta măsurarea corpului.
- Se apasă butonul de măsurare a temperaturii timp de o secundă pentru a porni termometrul. În urma pornirii, aparatul va produce un sunet de tip beep.
- Se poziționează aparatul în dreptul tâmplei, se apasă și se menține apăsat butonul de măsurare, apoi se deplasează ușor termometrul de-a lungul frunții până ajunge în dreptul celeilalte tâmples.
- Se eliberează butonul de măsurare. La sfârșitul timpului de măsurare aparatul va produce un sunet de tip beep. Rezultatul măsurării va fi afișat pe display.

2. Măsurarea unui obiect/unui lichid:

- Se apasă la stânga butonul de măsurare temperatura obiect/temperatura corp pentru a selecta măsurarea unui obiect.
- Se apasă butonul de măsurare a temperaturii pentru o secundă pentru a porni termometrul. În urma pornirii, aparatul va produce un sunet de tip beep.
- Se poziționează aparatul în dreptul obiectului de măsurat la o distanță de 3-5cm (a nu se introduce în lichide!).
- Se apasă butonul de măsurare și se ține apăsat pentru 5 secunde.
- După efectuarea măsurării aparatul va produce un sunet de tip beep iar rezultatul va fi afișat pe display.

IV. Specificații suplimentare

- Expunerea directă a senzorului la soare este interzisă. A se evita impacturile mecanice. A se evita contactul direct cu apa sau alte lichide.
- Măsurarea temperaturii trebuie efectuată înainte de a mânca, bea sau efectua activități fizice solicitante.
- După fiecare utilizare, curățați capacul senzorului cu o cârpă cu dezinfectant.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor
- Înainte și după fiecare utilizare a produsului trebuie verificate bateriile și înlocuite dacă este necesar.
- Rezultatele măsurării sunt doar pentru referință și nu pot înlocui diagnosticul doctorului. Nu luați tratamente fără prescripție și urmați instrucțiunile doctorului.
- Acest produs oferă două moduri de măsurare a temperaturii – măsurarea obiectelor și măsurarea temperaturii corpului, aplicabil pentru toți oamenii.