

Reprezentantul Meteka in Romania:
S.C. LEONARD Imp-Exp S.R.L.
Str. Pridvorului, nr. 7, sect. 4, 041201 Bucuresti
Tel/Fax: 021-3304636; 0314018814
Mobil: 0744.84.38.97
E-mail: aurel.gagea@leonard.ro
WEB: www.leonard.ro

SOLUTIA METEKA pentru dezinfectarea deseurilor medicale

MEDI[®]STER 10

Dispozitiv pentru dezinfectarea deseurilor medicale

Deseurile medicale sunt dezinfectate prin efectul termic al microundurilor, tehnologie pe deplin confirmata de practica. Deseurile medicale sunt scoase din MEDISTER, complet dezactivate si inofensive, putand fi tratate ulterior, ca orice resturi menajere.

Avantaje:

- Colectarea, transportarea si dezinfectarea deseurilor infectate in containere rezistente la gaurire si reutilizabile, protejaza pacientii si personalul medical impotriva ranirilor si infectarilor si contribuie major la profilaxia impotriva temerii de mediul spitalicesc.
- Deseurile nu se maruntesc inaintea procesului de dezinfectare.
- Procesul simplu de dezinfectare, dus la bun sfarsit direct la sursa de deseuri, previne raspandirea agentilor patogeni si pretejaza personalul de evacuare a deseurilor, fara transfer de infectie cu risc incalculabil in public.
- Indeplineste toate cerintele legale.
- Fara probleme de responsabilitate cand deseurile sunt dezinfectate la sursa.
- Reducerea costurilor cu pana la 90% comparat cu metodele conventionale de evacuare a deseurilor...
 - evacuarea deseurilor dezinfectate in tomberoane normale - fara conditii speciale de evacuare;
 - intretinere usoara si costuri mici;
 - operare cu cea mai mare usurinta si siguranta;
 - costuri mici de exploatare, fara contact direct cu sursa de alimentare, fara sursa externa de abur;
 - containerul pentru deseuri MEDITAINER este reutilizabil.



Materialele dezinfectate sunt in concordanta cu ARD/RID (Acordul European privind transportul materialelor periculoase pe sosele) incluse in categoria grupului de risc I si care pot fi in final aruncate impreuna cu deseurile menajere normale



METEKA

gives germs no chance

MEDI[®]STER 10

Dispozitiv pentru dezinfectarea deseurilor

Igiena METEKA si sistemul de control al infectiilor:

Deseurile infectioase produse in cabinetele practicienilor, laboratoare si in saloanele de izolare sunt colectate in containere pentru deseuri MEDITAINER, rezistente la gaurire, captusite cu pungi din plastic si dezinfectate termic la sursa. In acest scop containerele MEDITAINER pline, sunt incarcate in dispozitivul MEDISTER.

Sistemul de alimentare frontala al dispozitivului permite incarcarea si descarcarea ergonomica si in conditii de siguranta a containerelor MEDITAINER. Dupa dezinfectare, pungile continand deseurile, sunt aruncate ca orice gunoi menajer obisnuit, containerul MEDITAINER fiind refolosit.

Atestarea si aprobarea eficacitatii de dezinfectare:

Procesul de dezinfectare de inalta frecventa atinge spectrul A, B si C. El omora germeni de gradul I si IV (germene de referinta: spori de bacillus subtilis rata de reducere > 10⁵ log):

- toti virusii ca hepatita A, B, C, HIV, Polio;
- toti germenii vegetativi ca E. coli, stafilococ, streptococ, micobacterii, tuberculoza, antrax, tetanos, holera si germeni de tifos;
- sporii germenilor de antrax;
- toti parazitii si ciupercile.


Date tehnice:

	MEDISTER 10
Cantitatea max. de dezinfectare	6 litri
Timpul de dezinfectare / incarcatura	apox. 40 min.
Voltajul nominal	230 V, 50 Hz
	220 V, 60 Hz
Energia consumata / incarcatura	0,9 kWh
Dimensiuni (I x L x A) mm	530 x 530 x 470
Greutate	aprox. 33 kg
Puterea de intrare maxima	1,65 kWh (50 Hz)
	1,65 kWh (60 Hz)

Echipment

	MEDISTER 10
Dispozitiv de dezinfectare controlat de microprocesor	•
MEDITAINER 6L	•
VISCIT pudra	•
Controler de temperatura incorporat	•

In functie de tipul dispozitivului, dispozitivele MEDISTER sunt fabricate in conformitate cu urmatoarele standarde: EN55022/1994; EN50082-1; EN60335-1/1994+Amend.6/1989, EN50082Teil1; EN60335-2-25/1990; EN60601-1/1990; EN5081Teil1; EN60335-1/1988+Amend.2/1988+Amend.5/1989+Amend.6/1989; EN60335-2-25/1990+Amend.51/1992; EN292-1,2

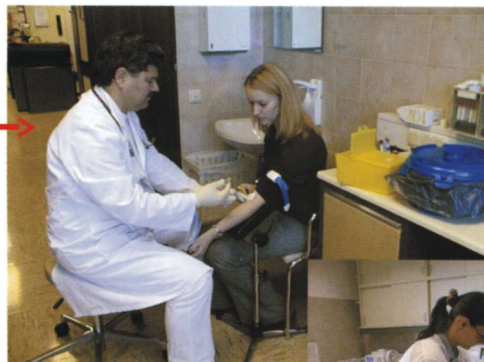

Colectare



Dezinfectare termica de inalta frecventa



Evacuarea cu gunoiul menajer

Cu deosebita consideratie

- Fara riscuri pentru om si mediul inconjurator -



METEKA GmbH
A-8750 JUDENBURG, Burggasse 108
Tel.: (43) 3572 / 85 1 66, Fax: (43) 3572 / 85 16 66
e-mail: meteka@aon.at, <http://www.meteka.com>